


- ◆ EmPro é indicado para conter e remover material embólico (coágulos/fragmentos) durante a realização de procedimentos de angioplastia e colocação de stents na artéria carótida

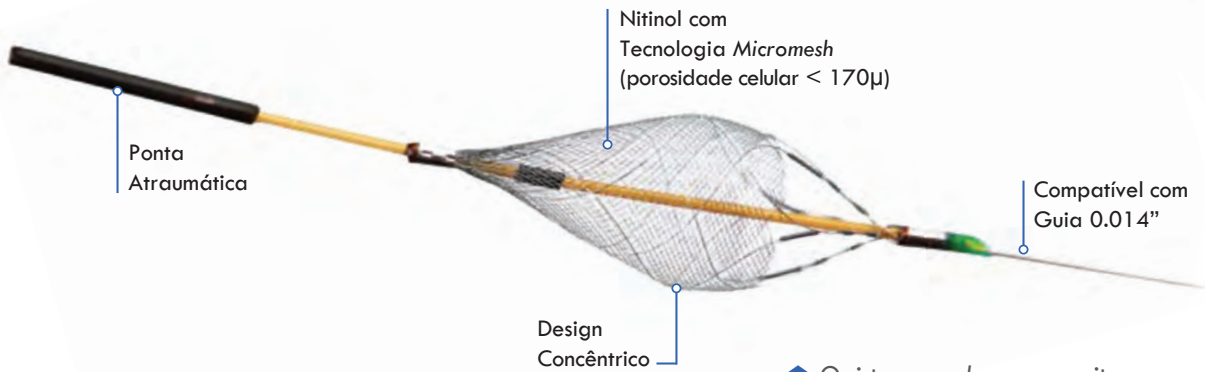

- ◆ O dispositivo de recuperação fecha simultaneamente o filtro em todos os ângulos, minimizando a perda de êmbolos, que ficam contidos na malha trançada


- ◆ O sistema *peel-away* permite a remoção completa do sistema de entrega, reduzindo a movimentação do filtro
- ◆ Possui um design concêntrico que permite uma expansão simétrica do filtro, resultando em boa aposição na parede do vaso

## EmPro® Sistema de Proteção Embólica

Uma unidade por embalagem / Incluindo cateter de entrega e cateter de recuperação

Referência	Tamanho	Tamanho do Vaso (mm)	Comprimento A (mm)	Comprimento B (mm)	Comprimento C (mm)
EP4514C-190	Small	3.0 – 4.5mm	5.2mm	36.3mm	19.6mm
EP6514C-190	Large	4.5 – 6.5mm	7.2mm	42.7mm	23.1mm

Registro Anvisa: 80583400016

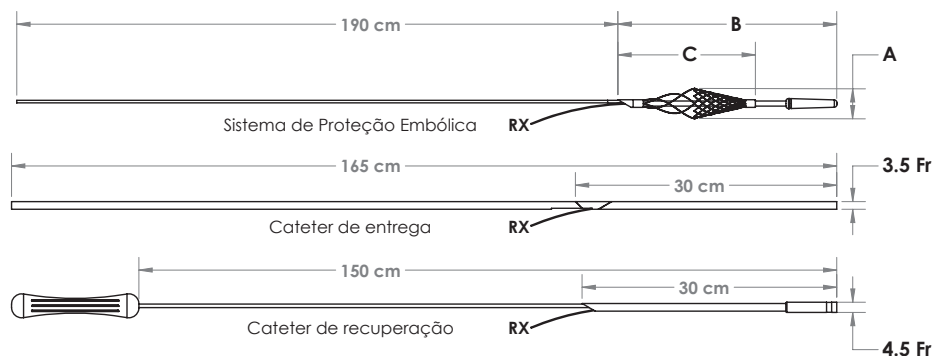

Distribuído por:

**ENDOTEC**  
MEDICAL

Rua Sampaio Viana, 202 - 6º andar - Cj. 61-65 - Paraíso  
CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil  
Fone: (11) 3884-8102  
Informações Técnicas: [endotec@endotecmed.com.br](mailto:endotec@endotecmed.com.br)  
[www.endotecmed.com.br](http://www.endotecmed.com.br)

Fabricado por:

**MicroVention™**  
TERUMO