

*Novo padrão de excelência,
redefinindo a navegabilidade,
versatilidade e controle*



Scepter
Balão de
Remodelamento



Balão Complacente desenvolvido para oclusão temporária e segura de vasos, se conformando à sua anatomia

Lúmen coaxial flexível fornece:

- Lúmen de insuflação separado e independente do lúmen de trabalho, que é compatível com microguias até 0.014"
- Maior navegabilidade, melhorando a estabilidade do balão durante a insuflação e desinsuflação

Único material em ambas configurações (X e XC) oferecendo versatilidade:

- Aplicação clínica ampla
- Diâmetro do balão atinge de 2 a 6 mm
- Compatível com Dimetil sulfoxido (DMSO) e líquidos embólicos como Onyx®
- Ponta distal pode ser moldada a vapor

Balão Extra Complacente desenvolvido para conformação em anatomias extremamente complexas, onde a cobertura do colo do aneurisma é mais desafiadora

Scepter C™

Scepter XC™




Balão com Revestimento Hidrofílico

- Reduz a fricção melhorando a navegação em vasos tortuosos
- Permite o uso de balões de grandes comprimentos para maior estabilidade, não comprometendo a navegabilidade



Compatível com guia 014

- Compatível com a extensão Docking wire da microguia Traxcess®

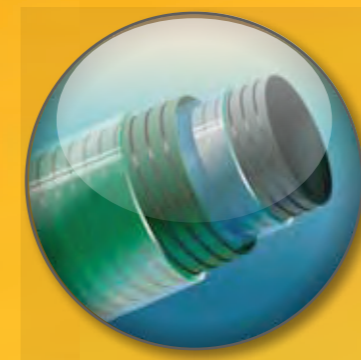

Maior Estabilidade do Balão

- Shaft coaxial reforçado com um coil interno fornece estabilidade durante a insuflação e desinsuflação do balão

Scepter C™ Balão Complacente




Referência	Descrição	Diâmetro do Balão (mm)	Comp. do Balão (mm)	Comp. Da ponta distal (mm)
1 balão, 1 bainha introdutora, 1 mandril por embalagem				
BC0410C	Balão de oclusão Complacente	4.0	10	5
BC0415C	Balão de oclusão Complacente	4.0	15	5
BC0420C	Balão de oclusão Complacente	4.0	20	5

Scepter XC™ Balão Extra Complacente



Referência	Descrição	Diâmetro do Balão (mm)	Comp. do Balão (mm)	Comp. Da ponta distal (mm)
1 balão, 1 bainha introdutora, 1 mandril por embalagem				
BC0411XC	Balão de oclusão Extra Complacente	4.0	11	5

Tabela de Complacência do Balão

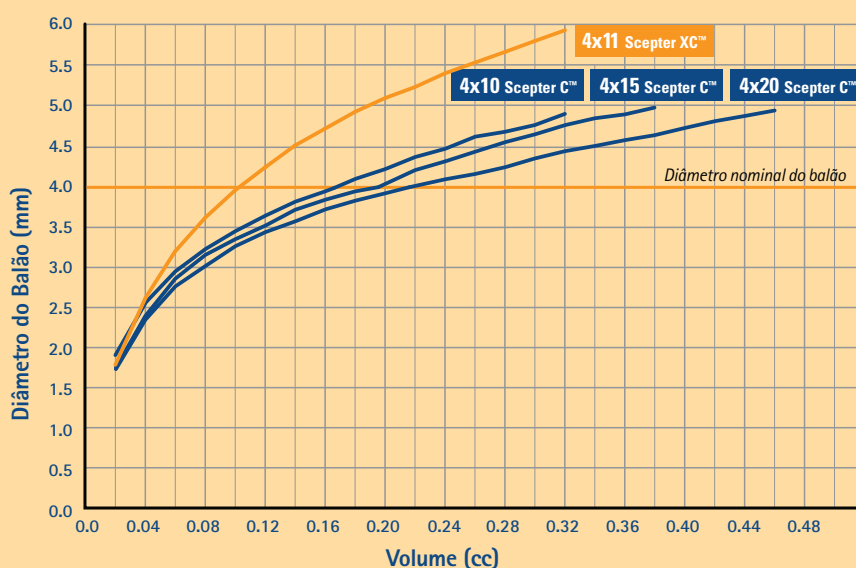

Registro ANVISA: 80583400011

Distribuído por:

ENDOTEC
MEDICAL

Rua Sampaio Viana, 202 - 6º andar - Cj. 61-65 - Paraíso
CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3884-8102
Informações Técnicas: endotec@endotecmed.com.br
www.endotecmed.com.br

Fabricado por:

MicroVENTION
TERUMO